

製品保証書

製品をご購入の際は、保証書にお買上日及びご購入先が記入されているかご確認ください。

記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、レシートなどお買上日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

販 売 名	美眼 S	型 番	BE-120
保 証 期 間	ご購入日から1年	保 証 対 象	本体(消耗品は除く)
ご購入者	フリガナ	製 造 番 号	
	お 名 前	ご 購 入 日	年 月 日
	ご 住 所	ご 購 入 先	
	電 話		電話 ()

年 月 日	修 理 内 容 及 び 修 理 部 品	担 当 者

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、記載された期間および条件のもとで無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によって保証責任者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

トクヨバイオテック株式会社

HP: <http://www.tokuyojp.co.jp/>
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-17
フェニックスビル601号室

お客様相談室受付: 11:00～17:00

※土日祭祝日を除く
0120-68-1094
info@tokuyojp.co.jp


家庭用

tokuyo

取扱説明書

保証書は裏表紙にあります

販売名：美眼 S
型 番：BE-120

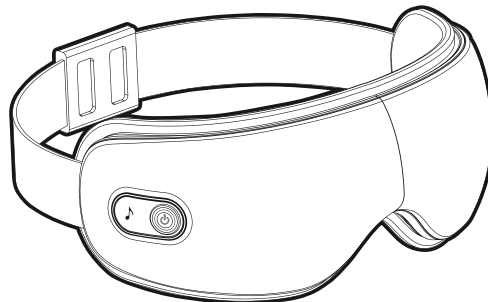

※本製品は誤りの使い方をしますと重大な事故につながります。

取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

ご使用後は取扱説明書をいつでも必要なときにご覧になれる場所に保管しておいてください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

目次

安全上の注意事項	2～6
梱包内容の確認	7
各部の名称	8
ご使用方法	9～11
故障かなと思ったら	12
お手入れ・メンテナンスおよび保管	13
仕様 / アフターサービス	14
製品保証書	15

仕様

型 番	BE-120
定格入力	DC 5V
消費電力	6W
充電時間	約 3～4 時間(急速充電規格には対応しておりません。)
使用時間	約 1 時間
本体質量	約 270 g
サ イ ズ	約 210 × 120 × 92 mm
製 造 国	中国
材 質	プラスチック、PUレザー、金属

アフターサービス

保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または製品保証書に明記しております弊社お客様相談室までお問い合わせください。

お手入れ・メンテナンスおよび保管

お手入れについて

- お手入れの際は、USBケーブルは必ず外してください。
- お手入れの際は、必ず電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
- 本体は、精密部品を使用していますので洗濯はできません。
- 本体は、乾いた柔らかい布などで軽くふき取ってください。

メンテナンスについて

- 本製品はリチウムイオン電池を使用していますので、長時間使用しない場合は、1ヶ月に1回フル充電をしてください。

保管について

- 本体の表面に付着した埃や汚れを落とし、高温多湿な場所を避けて保管してください。
- 本製品を長時間仕様しない場合は、埃などを避けるため、カバーなどで覆って保管してください。
- 乳幼児の手の届くところには保管しないでください。

安全上の注意事項

※ご使用前、この「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※表示と内容は、次のようになっています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡したり、重傷を負ったりする可能性のある内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が発生したりする可能性がある内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関する損害を指します。



強制事項(しなければいけないこと)を示します。



禁止事項(してはいけないこと)を示します。

お願い

- 本体及び付属品を破棄する際は、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

安全上の注意事項

ご使用前の注意事項

⚠ 警告

不特定多数の方や業務用での使用は避けてください。
本製品は家庭用機器です。

次の人は、使用しないでください。

- 体内埋（植え）込み型および装着型の医用電気機器（ペースメーカー、心電計など）を使用している人
- 顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人
- 骨折・整形などで顔面に金属・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
- 熱さを自覚できない人
- 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある人
- 強度の近視の人（-6D以上（ご不明な場合は医師にご確認いただくか、コンタクトレンズのパッケージの記載をご確認ください））
- 目の病気（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）のある人、またはあった人
- 目の手術をおこなった人（レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください）
- 体温38℃以上（有熱期）の人（例：急性炎症症状〔けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期。衰弱しているとき）
- 接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人
- 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- 過度の日焼けで肌が炎症を起こしている人
- 皮膚トラブルのある人
- 肌に重度のシミや創傷のある人
- 毛細血管拡張を起こしている人
- 自分で意思表示できない人や身体の不自由な人
- 幼児やお子様

事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合、失明の原因になります。

故障かなと思ったら

- 修理に出す前にもう一度点検してください。
それでも正常に動作しないときは買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- 絶対に分解や、修理改造はしないでください。
- 異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

状態	原因	対処方法
動作しない	電源ボタンを押していない	電源ボタンを長押ししてください
	充電されていない	充電してください
	連続使用時間が長すぎるため、加熱保護装置が作動している	30 分間使用を中断してください
充電できない	USBケーブルの端子（Type-C）が本体の充電差込口に正しく差し込まれていない	正しく差し込んでください
	ACアダプターの出力が高すぎる	本製品は急速充電規格には対応しておりません。 定格出力が65W以下、かつDC5V電流2A以上のACアダプターを使用してください。
充電時間が長すぎる	ACアダプターの出力電流が不足している	定格出力がDC5V電流2A以上のACアダプターを使用してください。
表示LEDが赤く点滅している	充電量不足	充電してください
エアーが弱い		

使用方法

本体の操作方法

ボタン	操作	機能
	音声のON / OFF	ボタンを長押しすると、ON / OFFになります。 (初期設定は「ON」です。)
	音楽の切り替え	電源がONの時、ボタンを1回押すと、音楽が切り替わります。 音楽は、3種類から選べます。

モードの説明

モード	表示LED	エアー加圧	温熱	音楽
スタンダードモード	紫	強	○	○
リフレッシュモード	青	中	○	○
リラックスモード	緑	弱	○	○
温熱モード	黄緑	×	○	○

レベル(温度)の説明

レベル	音声	温度
レベル 1	温熱 1	約38℃
レベル 2	温熱 2	約40℃
レベル 3	温熱 3	約42℃

安全上の注意事項

ご使用前の注意事項


警告



次の人は、使用前に必ず医師とご相談の上、ご使用ください。
 ●血圧に異常のある人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚感覚ある人 ●アトピー性皮膚炎の人 ●安静を必要とする人 ●脳神経に異常を感じている人 ●敏感肌や肌の弱い人 ●血行障害のある人

ご使用時の注意事項


警告



- 乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。
また、使用させないでください。
事故やけがの原因になります。
- 布団やこたつの内部では使わないでください。
製品自体の温度が高くなり、故障や事故の原因になります。
- 直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなどの高温のところには保管しないでください。
火災・事故の原因になります。
- 折りたたんだり、変形させたり、本体が重なった状態で使用しないでください。
内部のヒーター線を傷め、火災や感電・故障の原因になります。
- ピンや針などの金属物や異物を入れたりしないでください。
内部のヒーター線を傷め、火災や感電・故障の原因になります。
- 本体やUSBケーブル部に重量物をのせないでください。
内部のヒーター線を傷め、火災や感電・故障の原因になります。
- 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
事故やけがの原因になります。

安全上の注意事項

⚠ 警告



●浴室などの湿気の多い場所で使用したり、保管しないでください。
また、水のかかりやすい所（洗面所の上など）に置かないでください。
感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。



●絶対に改造しないでください。
また、ご自分で分解・修理をしないでください。
火災・感電・けが・故障の原因になります。

安全上の注意事項

⚠ 注意



- USBケーブルUSB端子を交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。
火災・感電・故障の原因になります。
- USBケーブルは水につけたり、水洗いしないでください。
感電やショートによる火災の原因になります。
- ぬれた手でUSB端子を抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。
- USB端子に埃が付着しないように定期的に掃除してください。
感電やショートによる火災の原因になります。
- 使用しないときや使用後はUSBケーブルを本体とUSB電源から抜いてください。
故障の原因になります。
- お手入れの際はUSBケーブルを本体とUSB電源から抜いてください。
感電やけがの原因になります。
- 使用中に異臭・異常な発熱・変色・変形など故障を発見した時は使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

使用方法

状態	表示LED
充電中	LED (赤) が点灯
充電完了	LED (緑) が点灯
電池の残量が少なくなる	LED (赤) が点灯と点滅を繰り返す

本体の操作方法

⚠ 注意

電源は、装着してから入れてください。
エアバッグの過圧で、故障の原因になります。

ボタン	操作	機能
	電源のON / OFF	ボタンを長押しすると、ON / OFFになります。
	モードの切り替え	電源がONの時、ボタンを1回押すと、モードが切り替わります。 モードの切り替えは、ボタンを押す毎に、スタンダードモード→リフレッシュモード→リラックスモード→温熱モードに順送りに切り替わります。
	温度の調整	動作中に、ボタンを2回連続で押すと、温度が切り替わります。 温度の切り替えは、ボタンを押す毎に、温熱1 (初期設定)→温熱2→温熱3→温熱OFFに順送りに切り替わります。

使用方法

本体への充電


①USBケーブルの端子 (Type-A) をACアダプターなどの電源のUSBポートに差し込む。

②USBケーブルの端子 (Type-C) を本体の充電差込口に差し込む。

※Type-C端子に上下の向きはありません。

横幅が合うようにゆっくり差し込んでください。

※ACアダプターは付属しません。

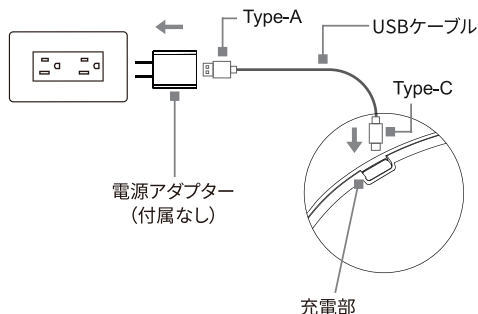

⚠ 注意

- 本体、USBケーブル等の接続はあまり力を入れず、真っすぐに差し込んでください。
 - 充電はDC5V (電流は2A以上) がおすすめです。
 - ① 家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるお手持ちのACアダプターをご利用ください。
 - ② お手持ちのUSB電源出力対応モバイルバッテリーでもご利用いただけます。
 - ※①②とも定格出力が65W以下、かつDC 5V電流2A以上のものを使用。
 - 安全のため、充電中は、本体の電源をONにできません。
 - 本製品は急速充電規格には対応していません。フル充電までに約3〜4時間かかります。
- 満充電時の連続使用時間は約1時間です。

安全上の注意事項

⚠ 注意



- 操作部を踏んだり、落としたり、ぶつけないでください。故障の原因になります。
- 保管の際、ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。発煙発火の原因になります。
- 本体を装着中、立ち歩いたり他の作業はしないでください。思わぬ事故につながります。
- メガネ・コンタクト・つけまづは外してください。目を傷つけたり、炎症の原因になります。
- 目元以外には使用しないでください。故障の原因になります。
- 付属品以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- ペンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品で拭かないでください。変色・変形・感電・引火のおそれがあります。
- 他の機器を同時に使用しないでください。事故や体調をくずすおそれがあります。

その他の注意事項

⚠ 注意






- 電源としてしようされたパソコン本体などの破損・損傷・データの損失については一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。



梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください。


●本体 ●USBケーブル ●収納ポーチ ●取扱説明書(保証書付)

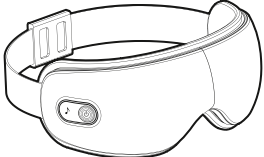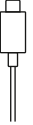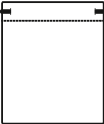本体	USBケーブル
	
	収納ポーチ
	
	取扱説明書(保証書付)
	

各部の名称

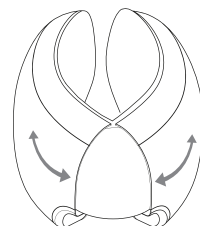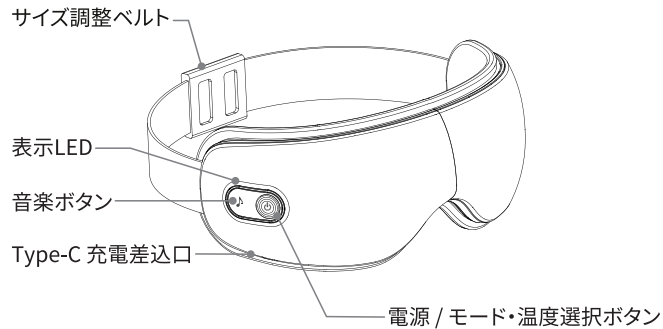

二つ折り収納

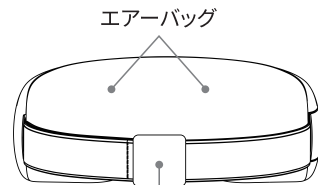

エアバッグ

サイズ調整ベルト