

製品保証書

製品をご購入の際は、保証書にお買上日及びご購入先が記入されているかご確認ください。

記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、レシートなどお買上日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

販売名	SMART体重体組成計	品番	TE-650	製造番号	
保証期間	お買い上げの日から1年間		保証対象	本体(但し、消耗品は除く)	
ご購入者	フリガナ		お買い上げ日	年 月 日	
	お名前		ご購入先		
	ご住所				
	電話			電話	()

年 月 日	修理内容及び修理部品	担当者

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

トクヨバイオテック株式会社

HP: <https://www.health-pit.com>
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-17
フェニックスビル601号室

お客様相談室受付: 11:00~17:00

※土日祭祝日を除く


0120-68-1094

info@tokuyojp.co.jp

TE-650 MANUAL 01

家庭用

tokuyo

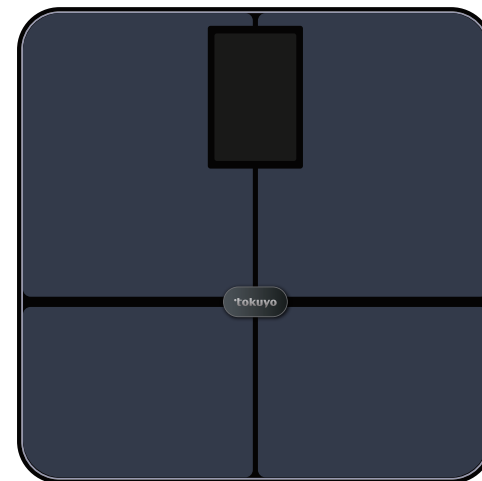

販売名: SMART体重体組成計
品 番: TE-650

取扱説明書

保証書(P16)にあります



Unique Health Appをダウンロードして、Bluetooth通信機能を利用できます。

※本器は誤った使い方をしますと重大な事故につながります。

取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

ご使用後は取扱説明書をいつでも必要なときにご覧になれる場所に保管しておいてください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

目次

目次	
安全上の注意事項	1~3
梱包内容の確認	4
各部の名称	5
TFTカラー液晶画面の説明	6
アプリの初期設定・個人データの登録	7~9
測定方法	10~12
故障かなと思ったら	13
アフターサービス／お手入れおよび保管	14
仕様	15
製品保証書	16

✕

This image shows a vertical sheet of white paper designed as a memo pad. At the top, there is a solid black horizontal band. Centered within this band is the Japanese word "メモ" (memo) written in a clean, white, sans-serif font. Below the black band, the rest of the page is white and filled with thin, light gray horizontal lines spaced evenly apart, providing a template for writing.

メモ

安全上の注意事項

※ご使用前、この「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※表示と内容は、次のようになっています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、※物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



記号は、禁止(してはいけないこと)を示します。
(左図は、分解禁止)

お願い

●本体及び付属品を破棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。

詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

安全上の注意事項

ご使用前の注意

⚠ 警告



次の人は、使用しないでください。

- 本製品は家庭用機器です。不特定多数の方や業務用での使用はしないでください。
- 体内埋（植え）込み型および装着型の医用電気機器（ペースメーカー、心電計など）を使用している人。

ご使用の注意

⚠ 警告



●乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。また使用させないでください。

事故やけがの原因になります。

●タイル面やぬれた床など、すべりやすい所には絶対に置かないでください。

転倒したり、すべったりして事故やけがの原因になります。

●測定結果は、決して自己判断しない（測定値の評価、それに基づく運動メニュー等）

必ず医師または、資格をもった専門家の指示に従ってください。

●本器の端にのったり、飛乗ったり、跳びはねたりしない。

転倒したり、すべったりして事故やけがの原因になります。

●体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しないでください。

介護者に援助してもらってください。



●浴室などの湿気の多い場所で使用したり、保管しない。また、水のかかりやすい所（洗面所の上など）に置かないでください。

感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。

仕様

販売名	tokuyo SMART体重体組成計	
型番	TE-650	
定格	電源	DC5V 1A以上
	周波数	50/60Hz
	消費電力	50W
測定単位	kg	
自動起動重量	3 kg	
測定範囲	3 ~ 180 kg	
センサー	E型センサー	
動作温度範囲	5～40℃	
動作湿度範囲	≥90%RH	
保管温度	-20～50℃	
Bluetoothのバージョン	Bluetooth5.0 スマートフォン側はBluetooth4.0以上が必要です。	
耐荷重	120 kg	
充電時間	約2時間（フル充電まで）	
使用時間	4ヶ月（毎日30秒を3回使用する場合）	
寸法	幅：約300×奥行：約300×高さ：約26（mm）	
重量	約1.5 kg	
材質	強化ガラス、ABS樹脂、ゴム	
生産国	中国	
総発売元	トクヨバイオテック株式会社	

※本製品は医療機器ではありません。

アフターサービス

保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または下記に明記しております弊社お客様相談室までお問い合わせください。

お手入れおよび保管

お手入れについて

- お手入れの際は、本体からUSBケーブルを必ず外してください。
- 本体は、中性洗剤を水で薄め、やわらかい布つけてよく絞り、軽くふき取ってください。

保管について

- 本体の表面に付着した埃や汚れを落とし、高温多湿な場所を避けて保管してください。
- 本製品を長時間仕様がしない場合は、埃などを避けるため、カバーなどで覆って保管してください。
- 乳幼児の手の届くところには保管しないでください。

安全上の注意事項

ご使用の注意(つづき)

⚠ 警告



●絶対に改造しない。また、ご自分で分解・修理をしない。
火災・感電・けが・故障の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意



●表示部には、のらない。
破損して、けがや故障の原因になります。

●乳幼児には絶対に持ち運びさせないでください。
落としたりしてけがの原因になります。

●電源コードのプラグ部、コネクター部、ACアダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。
感電やショートによる火災の原因になります。

●ぬれた体でのらないでください。
入浴後、体や足の水分をよく拭いてから測定してください。

●使用中に異臭・異常な発熱・変色・変形など故障を発見した時は使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

●保管の際、ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
発煙発火の原因になります。

●付属品以外は使用しない。故障の原因になります。

●ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品で拭かない。
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。

●他の機器を同時に使用しない。事故や体調をくずすおそれがあります。






●お子様が使用の際には、保護者がつきそうか正しい使用方法を教えてください。
思わぬ事故につながります。

梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください。

●本体 ●USBケーブル ●取扱説明書(保証書付)

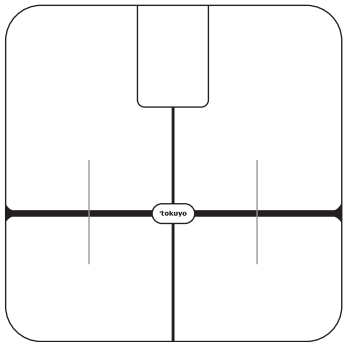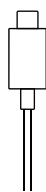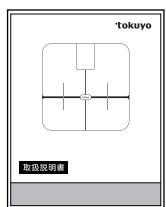本体	USBケーブル
	
	取扱説明書(保証書付) 

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

状態	原因	対処方法
画面が表示されない	充電がされていない	充電してください。
測定データが正常でない	感知が正常にできていません	靴や靴下を履いたまま測定しないでください。また、金属製のアクセサリなどを外してください。
表示画面にオーバーロードが表示されている	耐荷重範囲を超えています	使用時は180kgを超えないで使用してください。
操作中に停止する	連続使用時間が長すぎて過熱保護装置が作動しています	本器が常温になるまで使用しないでください。
画面表示がゼロリセットしない	センサーが水平でない場所で使用されています	本器を水平な場所に置いてご使用ください。


測定方法

4. アプリを使用して測定する場合、より多くの情報が得られます。スケールの上を踏むことでデータを切り替え、アプリと同期させることができます。

液晶画面表示データ (表面を踏むとデータが切り替わります)	アプリ表示データ	
 体重	 体重	 基礎代謝率
 ボディマス指数	 ボディマス指数	 除脂肪体重
 体脂肪率	 体脂肪率	 脂肪量
 内臓脂肪	 内臓脂肪	 体年齢
 骨量	 骨量	 筋肉率
 心拍数	 心拍数	 筋肉量
 体内水分率	 体内水分率	 体型
	 タンパク質	

1. 測定が終了すると、スケールは10秒後に自動的に電源がオフになります。
2. 正確な年齢と身長を入力すると、より実際の状況に近いデータが得られます。

各部の名称

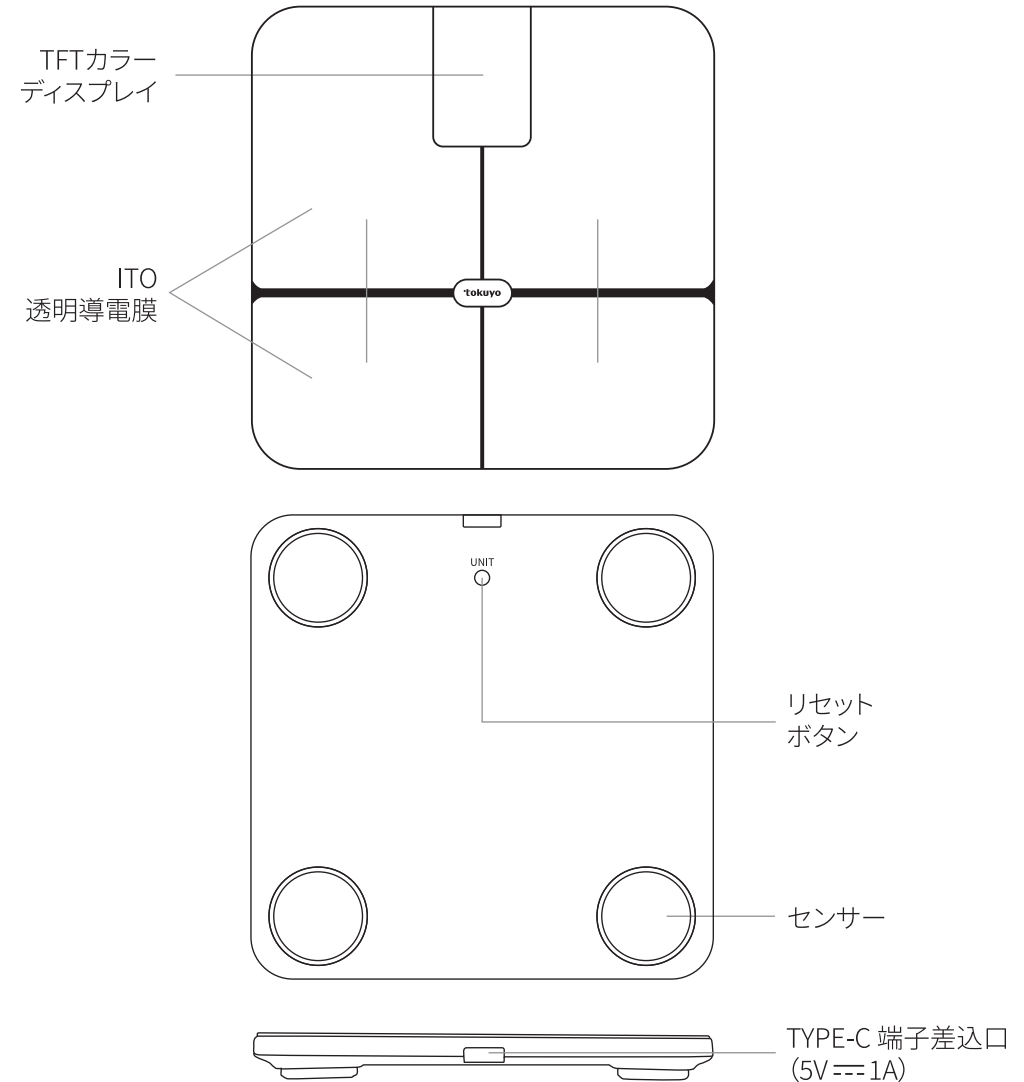

- ① 本器は圧力感知式で固く平らな接地面で3kg以上の圧力を感知すると電源が入ります。
- ② 本器は充電式ですのでUSBケーブル側をACアダプター（付属しておりません）に差込。本器にはTYPE-C端子側を差込充電を行ってください。

TFTカラー液晶画面の説明



測定方法

3. 数字が3回点滅した後、体重の測定が完了し、心拍数の測定に入ります。測定を中断しないように体重計から離れないでください。
4. 以降についてはアプリで操作・表示ができます。



体重表示画面



心拍数測定画面

●説明:

1. Unique Health Appに接続されているユーザーは、心拍数の測定が完了するとアプリと同期され、スケールの画面に体のデータが表示されます。軽くスケールの上を踏むと、データが切り替わります。
2. アプリに登録していないユーザーはゲストモードに入り、体重と心拍数の表示のみとなります。

備考: 靴下を履いた状態での測定は体重のみが測定されます。



足での切り替え(データ)
スケールの左側または右側を軽く踏むと、スケールの左右に力がかかり、データの選択が可能です。

測定方法

●測定手順

1. 本器を硬く平らな床に置きます。
2. 本器の上に正しい姿勢で足を置いてください。(体重が3kg以上の場合測定可能となります)

正しい姿勢: 本器の上に垂直に立ち、本器の中心から左右に足を置いてください。

正しい姿勢




○ 本器の中心から
左右に足を置く

間違った姿勢



✗ 足を本器の隅に
のせる。

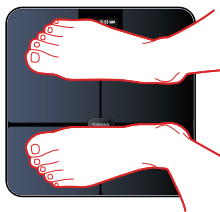

✗ 足の位置を左右
や背面でのせる。



✗ 両足を前後に
ずらしてのせる。

間違った姿勢で本器に乗ると測定が正しくできません。

アプリの初期設定・個人データの登録

アプリのインストール

1. スマートフォンの設定よりBluetooth機能オンにしてください。
2. 初めにお使いのスマートフォンに無料のUnique Health Appをインストールしてください。または次のQRコードを読み込んでインストールを行ってください。



アカウントの作成

1. アプリを起動した後、「今すぐサインアップ」から、アカウントを作成してください。

ログイン

郵便

パスワード 


☐ パスワードを覚える

ログイン


[今すぐサインアップ](#) | [パスワードを忘れた場合](#)

アプリの初期設定・個人データの登録

デバイスの接続

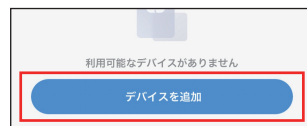


1. ログインした後、「デバイスを追加」をタップしてください。
2. 下記の指示に従って、デバイスを登録してください。

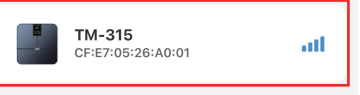1  注: バッテリーを挿入した後、デバイスを硬くて平らな面に置きます。	2  新しいデバイスが見つかりました 
3  57s デバイスの接続 デバイスと携帯電話をできるだけ近づけてください	4  デバイスの接続に成功しました

アプリの初期設定・個人データの登録

個人データの登録

1. ログインした、「私の」をタップしてください。
2. 「会員管理」をタップしてください。
3. 「メンバーを追加する」をタップして、個人データの登録ができます。
4. 複数の人の登録の仕方はアプリより行ってください。

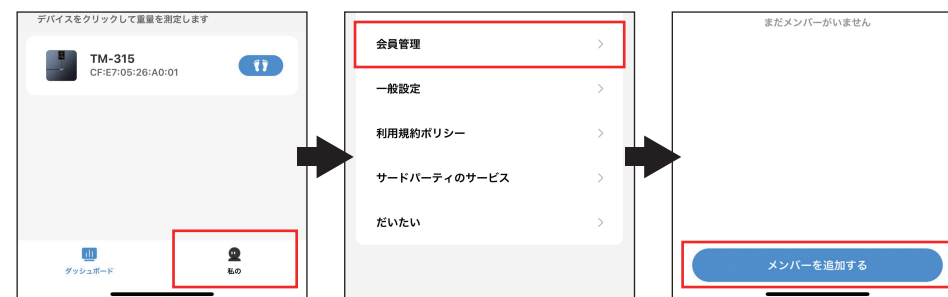

測定方法

1. 接続されたデバイスをタップしてください。
2. スケールで測ってください。

