

アフタサービス

保証期間中の修理などアフタサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または下記に明記しております弊社お客様相談室までお問い合わせください。

製品保証書

製品をご購入の際は、保証書にお買上日及びご購入先が記入されているかご確認ください。

記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、レシートなどお買上日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

販売名	温熱バイブアイマスク	品番	TE-670
製造番号		保証期間	お買い上げの日から一年間
ご購入者	フリガナ	保証対象	本体(但し、消耗品は除く)
	お名前	お買上日	
	ご住所	ご購入先	
	電話		
		電話	()

年 月 日	修理内容及び修理部品	担当者

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

トクヨバイオテック株式会社 HP: http://www.tokuyojp.co.jp 本社〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-17 フェニックスビル601号室	お客様相談室受付: 11:00~17:00 ※土日祭祝日を除く 0120-68-1094 info@tokuyojp.co.jp
--	--

家庭用


tokuyo

品番: TE-670

販売名: 温熱バイブアイマスク

取扱説明書

保証書は裏表紙にあります

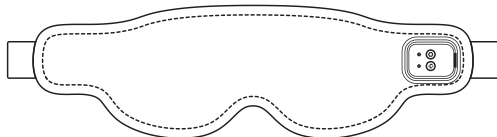

安全上の注意事項	1~5
梱包内容の確認	5
各部の名称	5~6
ご使用方法	6~8
お手入れ・メンテナンスおよび保管	8
故障かなと思ったら	8~9
仕様	9
アフタサービス	10
保証書	10

このたびはTE-670をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

ご使用後は取扱説明書をいつでも必要なときにご覧になれる場所に保管しておいてください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

安全上の注意事項

- ・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ・表示と内容は、次のようになっています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	誤った取扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。
⚠注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が発生する可能性のある内容を示します。

 左図は、分解禁止。
禁止(してはいけないこと)を示します。

- ・本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見えることのできる場所に、必ず保存してください。

お願い

- ・本体及び付属品を破棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

×毛

[illegible]

状態	原因	対処方法
動作しない	温熱/振動ボタンを押していない	温熱/振動ボタンを押してください
	充電がされていない	充電してください
充電できない	USBケーブルの端子 (Type-C) が本体の充電差込口に正しく差し込まれていない	正しく差し込んでください。
LED (白) が点灯と点滅を繰り返す	充電量不足	充電してください
温熱や振動が弱い		

仕様

販売名	温熱バイブアイマスク	
品番	TE-670	
定格	電源	DC5V 1A以上
	消費電力	4W
タイマー	温熱:約20分	振動:約20分
温熱レベル	2段階	
振動レベル	4段階	
寸法	長さ約337×幅約91×高さ約35 (mm)	
質量	約90g	
素材	合成樹脂、フランネル、金属	
生産国	中国	
総発売元	トクヨバイオテック株式会社	

※本製品は医療機器ではありません。

警告

次の人は、使用しないでください。

- 体内埋 (植え) 込み型および装着型の医用電気機器 (ペースメーカー、心電計など) を使用している人
- 顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人
- 骨折・整形などで顔面に金属・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
- 熱さを自覚できない人
- 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある人
- 強度の近視の人 (−6D以上 (不明な場合は医師にご確認いただくか、コンタクトレンズのパッケージの記載をご確認ください))
- 目の病気 (白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など) のある人、またはあった人
- 目の手術をおこなった人 (レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください)
- 体温38℃以上 (有熱期) の人 (例: 急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、決圧変動など] の強い時期。衰弱しているとき)
- 接触製皮膚炎等、皮膚に既往症のある人
- 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- 皮膚トラブルのある人
- 肌に重度のシミや創傷のある人
- 毛細血管拡張を起こしている人
- 自分で意思表示できない人や身体の不自由な人
- 幼児やお子様

事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合、失明の原因になります。

安全上の注意事項

⚠警告

次の人は、使用前に必ず医師とご相談の上、ご使用ください。
 ・血圧に異常のある人・悪性しゅよう(腫瘍)のある人・心臓に障害のある人・妊娠中、または出産直後の人・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚感覚ある人・アトピー性皮膚炎の人・安静を必要とする人・脳神経に異常を感じている人・敏感肌や肌の弱い人・血行障害のある人

ご使用について

⊘	●乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。また使用させないでください。 事故やけがの原因になります。 ●布団やこたつの内部では使わないでください。 製品自体の温度が高くなり、故障や事故の原因になります ●直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなどの高温のところには保管しないでください。 火災・事故の原因になります。 ●折りたたんだり、変形させたり、本体が重なった状態で使用しないでください。 火災や感電・故障の原因になります。 ●ピンや針などの金属物や異物を入れたりしないでください。 火災や感電・故障の原因になります。 ●本体やUSBケーブル部に重量物をのせないでください。 火災や感電・故障の原因になります。 ●身体に異常を感じた時は、使用を直ちに中止してください。 事故やけがの原因になります。
⊘	●浴室などの湿気の多い場所で使用したり、保管しない。また、水のかかりやすい所(洗面所の上など)に置かないでください。 感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。
⊘	●絶対に改造しない。また、ご自分で分解・修理をしない。 火災・感電・けが・故障の原因になります。

振動ボタンの説明

振動ボタン ON/OFF	長押しON、更に長押しOFF
振動切換	振動の強さは、4段階ボタンを押すと振動が切り替わります。ボタンを押すたびに強さが切り替わります。

お手入れ・メンテナンスおよび保管

お手入れについて

- お手入れの際は、USBケーブルは必ず外してください。
 - お手入れの際は、必ず電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
 - 本体は、精密部品を使用していますので洗濯はできません。
 - 本体は、中性洗剤を薄めた水に布をつけて、軽くふき取ってください。
 - アイマスクは外して手洗いで洗濯できます。(強く擦らず洗ってください、干す時は陰干しにしてください)
- メンテナンスについて
- 本製品はリチウム電池を使用していますので、長時間使用しない場合は、1カ月に1回フル充電をしてください。
- 保管について
- 本体の表面に付着した埃や汚れを落とし、高温多湿な場所を避けて保管してください。
 - 本製品を長時間仕舞わない場合は、埃などを避けるため、カバーなどで覆って保管してください。
 - 乳幼児の手の届くところには保管しないでください。

故障かなと思ったら

- 修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- 絶対に分解したり、修理改造はしないでください。
- 異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

⚠注意

- 本体、USBケーブル等の接続はあまり力を入れず、真っすぐに差し込んでください。
- 充電はDC5V(電流は1.5A以上)がおすすめです。
- ①家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるお手持ちのACアダプターをご利用ください。
- ②お手持ちのUSB電源出力対応モバイルバッテリーでもご利用いただけます。
- ※①②とも定格出力が5V電流1A以上のものを使用。

2. 本体を装着する

目の位置に合わせて、頭の後ろで面ファスナーを取付ける。
温熱は約20分、振動は約20分で自動停止します。

●途中で停止したいとき

温熱ボタンまたは振動ボタンを長押しすると、LEDが消え停止します。

⚠注意

- 面ファスナーにごみやほこりが着かないように注意してください。
- 面ファスナーの接着力が弱くなります。
- 安全の為、本体を装着したままで立ち歩いたり他の作業をしないでください。
- けがをするおそれがあります。

温熱ボタンの説明

温熱ボタン ON/OFF	長押しON、更に長押しOFF
温度切換	最初は高温(LED赤点灯)、ボタンを押すと低温(LED青点灯)＜ボタンを押すと切り替えます＞ 高温:約〇〇℃、低温:約〇〇℃

安全上の注意事項

⚠注意

- USBケーブルを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないで下さい。

火災・感電・故障の原因になります。

- USBケーブルは水につけたり、水洗いしないでください。

感電やショートによる火災の原因になります。

- ぬれた手でUSB端子を抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。

- USB端子にほこりが付着しないように定期的に掃除してください。

感電やショートによる火災の原因になります。

- 使用しないときや使用後はUSBケーブルを本体とUSB電源から抜いてください。

故障の原因になります。

- お手入れの際はUSBケーブルを本体とUSB電源から抜いてください。

感電やけがの原因になります。

電源としてしようされたパソコン本体などの破損・損傷・データの損失については一切の責任を負いかねます。

- 使用中に異臭・異常な発熱・変色・変形など故障を発見した時は使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

- 操作部を踏んだり、落としたり、ぶつけないでください。

故障の原因になります。

- 保管の際、ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

発煙発火の原因になります。

- 本体を装着中、立ち歩いたり他の作業はしないでください。

思わぬ事故につながります。

- メガネ・コンタクト・つけまっげは外してください。

目を傷つけたり、炎症の原因になります。

- 目元以外には使用しないでください。

故障の原因になります。



	●付属品以外は使用しない。 故障の原因になります。 ●ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品で拭かない。 変色・変形・感電・引火のおそれがあります。 ●他の機器を同時に使用しない。 事故や体調をくずすおそれがあります。
	●お子様が使用の際には、保護者がつきそうか正しい使用方法を教えてください。 思わぬ事故につながります。

梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているかご確認ください。

・本体 ・USBケーブル ・アイマスク(本体取付) ・取扱説明書(保証書付)

各部の名称

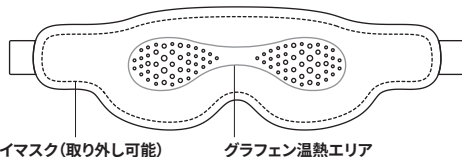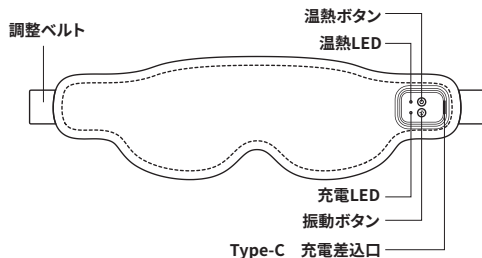

アイマスク(取り外し可能)

グラフェン温熱エリア

注意

●アイマスクを外した状態で使用しないでください。
使用の際は、必ずアイマスクを装着して使用してください。
やけどの原因になります。

ご使用方法

1. 本体への充電

① USBケーブルの端子 (Type-A) をACアダプターなどの電源のUSBポートに差し込む

② USBケーブルの端子 (Type-C) を本体の充電差込口に差し込む。

※Type-C端子に上下の向きはありません。横幅が合うようにゆっくり差し込んで下さい。

※ACアダプターは付属しません。

充電時の状態

状態	充電LEDの状態	時間の目安
充電中	LED (白) が点灯と点滅を繰り返す	-
充電完了	LED (白) が点灯	約2時間
電池の残量が少なくなる	LED (白) が点滅	約1時間